

Руководство по эксплуатации  
Универсального массажера  
**LeFan 3D Kneading Pillow**

## Элементы продукта



Корпус



Зарядный кабель Type-C

## Особенности продукта

Данный продукт предназначен для разных частей тела, особенно эффективно его воздействие проявляется на плечах, шее, пояснице и ногах.



Плечи и шея




Поясница



Ноги

## Применение и функции

При получении продукта, пожалуйста, убедитесь в отсутствии повреждений. Разместите продукт на массируемой части тела и убедитесь в его устойчивом и комфортном положении. Продукт работает по автоматическому таймеру на 15 минут, то есть после 15 минут работы он автоматически отключается.

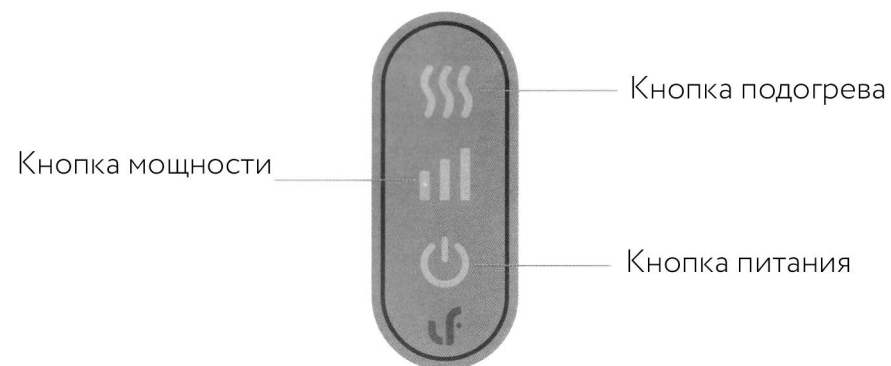

### Кнопка питания

Длительное нажатие в течение 1 секунды включает режим работы по умолчанию на медленной скорости, массажные головки начинают вращаться по часовой стрелке (Движение слева направо, если смотреть на механизмы). Короткое нажатие на кнопку переключает направление вращения головок. После переключения направления вращения индикатор мигает один раз. Длительное нажатие на кнопку во время работы выключает устройство. При выключении механизмы возвращаются на исходную позицию, а индикатор на кнопке включения мигает в течение 3 секунд, после чего затухает.

### Кнопка мощности

При работе в слабом режиме по умолчанию нажатие на данную кнопку циклически изменяет скорость вращения массажных головок в следующем порядке: медленная - средняя - высокая. При переключении на медленную скорость, индикатор мигает один раз; при переключении на среднюю скорость индикатор мигает два раза; при переключении на высокую скорость, индикатор мигает три раза.

### Кнопка подогрева

Во время работы устройства нажатие на данную кнопку включает подогрев, при этом загорается индикатор. При включенном подогреве повторное нажатие на кнопку выключает подогрев, индикатор затухает.

## Разъяснение показаний индикатора

**Низкий заряд/Возврат в исходное положение:** быстрое мигание

**Полный заряд:** индикатор не горит

**Идёт зарядка:** режим дыхания

**Работа:** горит постоянно

- Зарядное устройство с поддержкой QC2.0 и выше либо протокола PD способно полностью зарядить продукт примерно за 4 часа;
- С помощью стандартных зарядных устройств с током 5 В/1А или 5В/2А полностью зарядить продукт можно примерно за 10 часов;
- При полном заряде устройство может проработать примерно 50 минут (При включенном массаже и подогреве);
- При низком заряде аккумулятора для питания от сети можно использовать устройство мощностью 45 Вт или устройство с поддержкой протокола PD.
- Рекомендуется не использовать устройство более двух циклов подряд (Всего 30 минут).

## Характеристики продукта

**Наименование:** Lefan 3D Massage Pillow

**Вес продукта:** 2.36±0.2 кг

**Модель:** LF-AP017

**Номинальная мощность:** 5В 24Вт

**Габариты:** 254×200×239 мм

**Действующий стандарт:** GB4706.1-2005,  
GB4706.10-2008

## Примечания по эксплуатации

Перед использованием продукта внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

При использовании электронных продуктов, особенно при использовании детьми, следует соблюдать правила техники безопасности, включая следующие:

- После использования и перед мытьём следует отключить питание;
- При попадании продукта в воду не следует прикасаться к нему незащищёнными руками;
- Не следует использовать продукт во время приема душа или ванны;
- Во избежание попадания в воду не следует размещать продукт возле раковины или ванны;
- Во время зарядки не следует оставлять продукт без присмотра. По окончании зарядки следует отключить устройство от сети;
- При использовании продукта детьми или лицами с ограниченными возможностями использование должно происходить под надзором лица, отвечающего за их безопасность;
- Продукт предназначен для использования в строгом соответствии с руководством по эксплуатации, не следует применять его вместе с иными принадлежностями;
- В случае повреждения кабеля питания следует незамедлительно прекратить использование продукта;
- В случае возникновения неисправности продукта, его падения, повреждения или погружения в воду продукт следует передать в авторизованный сервисный центр для обслуживания и ремонта;

- Во время зарядки кабель питания следует держать вдали от горячих поверхностей;
- Не следует размещать какие-либо предметы в открытых частях продукта;
- Не следует использовать продукт в средах, насыщенных аэрозолями или кислородом;
- Не следует использовать продукт на ковре или под подушкой, поскольку перегрев может привести к возгоранию, удару током или иным травмам;
- Не следует использовать кабель питания для переноса продукта или в качестве рукоятки;
- При выключении питания следует также отключить все функции;
- Во время использования продукта не следует допускать его соприкосновения с лёгкой одеждой, украшениями и длинными волосами;
- В случае обнаружения неисправности или аномалий в работе продукта следует незамедлительно прекратить его использование;
- Не следует использовать продукт при повреждении тканевого чехла;
- Продукт не может применяться в медицинских целях, он предназначен исключительно для массажа;
- Перед использованием продукта рекомендуется проконсультироваться со специалистом в следующих случаях:
  - Беременность;
  - Использование кардиостимулятора;
  - Плохое самочувствие или прохождение клинического лечения;
  - Остеопороз;

- Не рекомендуется использовать больным диабетом;
- Не следует оставлять продукт без присмотра, особенно при использовании детьми;
- Не следует закрывать продукт во время работы;
- Не следует использовать продукт более чем 15 минут за один раз;
- Продукт содержит нагревающиеся поверхности, при использовании нагрева следует проявлять осторожность;
- Во время массажа шеи и плеч массажные головки должны прилегать к обеим сторонам шеи, в противном случае возможно появление боли;
- Не следует использовать продукт за час до и в течение часа после приема пищи.